

SISTEMA DE MAMPARAS SILENTIA



La alternativa líder para higiene y privacidad óptimas de los pacientes

CE





Establecimos el nivel en 1990. Hasta hoy hemos entregado 100.000 mamparas en todo el mundo.

Silentia ofrece una solución completa para satisfacer los requisitos de separación en la asistencia sanitaria. La compatibilidad entre las mamparas de la gama junto con la función *EasyClick* permiten el traslado fácil de una mampara plegable desde una pared a un carro, o combinar una mampara fija con una mampara plegable para aprovechar al máximo todas las posibilidades del sistema.

Higiene óptima: esto es *EasyClean*™

La mampara tiene superficies lisas y resistentes a los desinfectantes usados en la asistencia sanitaria. Las ruedas encapsuladas se quitan fácilmente y se lavan en máquina lavavajillas. Los productos cumplen con estrictos requisitos de higiene y todas las superficies son fácilmente accesibles para limpiar: esto es *EasyClean*.

Plegado fácil con una mano – *EasyReturn*™

La mampara tiene bisagras patentadas con una *memoria integrada* que facilita el manejo y la prevención de infecciones cruzadas gracias a que sólo hay un único punto de contacto: el mango ergonómico.

Mampara fija o móvil: el usuario elige fácilmente con *EasyClick*™

Movilidad fácil. Una mampara montada en pared también se puede fijar en un carro para uso móvil o en otros componentes del sistema, con lo que es un sistema completo con numerosas posibilidades y fácil de usar en todos los departamentos.

Marcado CE de conformidad con la Directiva UE de Dispositivos Médicos (DDM).



- Nuestros productos se ofrecen en diferentes longitudes y alturas y forman parte de un sistema completo que se puede adaptar a sus necesidades específicas.
- La construcción ligera es fácil de usar y optimiza la estabilidad y la seguridad (<math>< 5\text{kg/m}^2</math>).
- Productos fabricados con materiales reciclables.
- Los paneles separadores están fabricados con laminado a alta presión o perfiles de policarbonato resistentes a los desinfectantes utilizados en centros de asistencia sanitaria.

EasyClean



EasyClean



EasyReturn



EasyClick





Mamparas plegables

La sencillez es uno de los principios que guían nuestro desarrollo de productos. Debe ser fácil separar a pacientes cuando necesitan privacidad o, simplemente, quieren estar solos. También tiene que ser fácil mover piezas y expandir el sistema, por lo que todos los componentes están diseñados para ser compatibles entre sí.

VERSIÓN ESTÁNDAR PARA MONTAJE DIRECTO EN PARED
La fijación de pared facilita el montaje. Fijación de mampara EasyClick.

El panel de 25 cm ahorra valioso espacio de pared sin comprometer la privacidad de los pacientes.



CARRO DE MAMPARA
Accesorio para mamparas plegables. Fijación de mampara EasyClick.

La base con ruedas ocupa muy poco espacio.



POSTE PARA MONTAJE ENSUELO
Se fija en el suelo. Se usa cuando la mampara debe estar independiente en la sala. Fijación de mampara EasyClick.



MONTAJE EN PARED CON SEPARADOR
Se usa cuando la mampara debe fijarse un poco separada de la pared; por ejemplo, para que haya espacio para un panel de cuidados. Fijación de mampara EasyClick.



MONTAJE EN RIEL DE PARED
La mordaza se usa cuando la mampara se monta en riel de pared para movimiento en sentido lateral. Si la longitud de la mampara es superior a 2,25 m, se usan dos rieles IVA. Fijación de mampara EasyClick.





Mamparas plegables móviles

MONTAJE EN CARRO

Montando la mampara en un carro se consigue una práctica separación móvil. Este carro es adecuado para mamparas plegables de varias longitudes: desde 5 a 15 secciones. Altura: 1,45 m, 1,65 m ó 1,85 m. El diseño patentado ocupa muy poco espacio de suelo y proporciona una estabilidad máxima.







Mamparas móviles para extremos de cama


MAMPARA FRONTAL SILENTIA DE 1,5 M

Protección de miradas eficaz en el extremo de la cama. También puede usarse como caseta vestuario. Anchura, extendida: 1,5 m. Altura: 1,55 m y 1,85 m. El diseño patentado ocupa un mínimo de espacio de suelo y proporciona una estabilidad máxima.

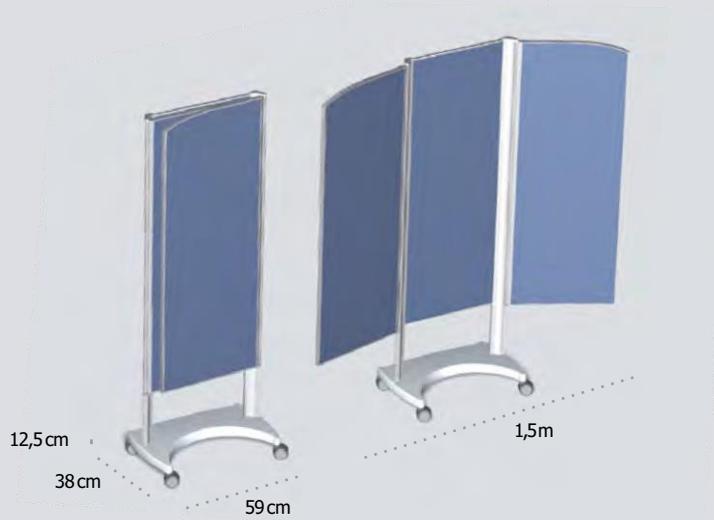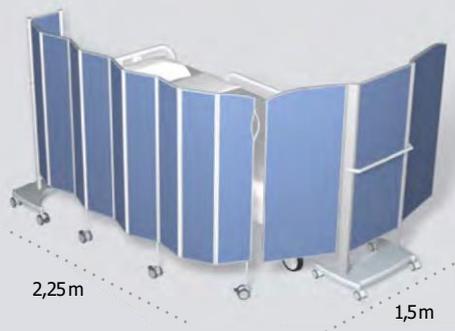

MAMPARA FRONTAL SILENTIA DE 2,0 M

La nueva mampara frontal es útil cuando se desea una separación más larga. Anchura, extendida: 2,0 m. Altura: 1,55 m y 1,85 m.

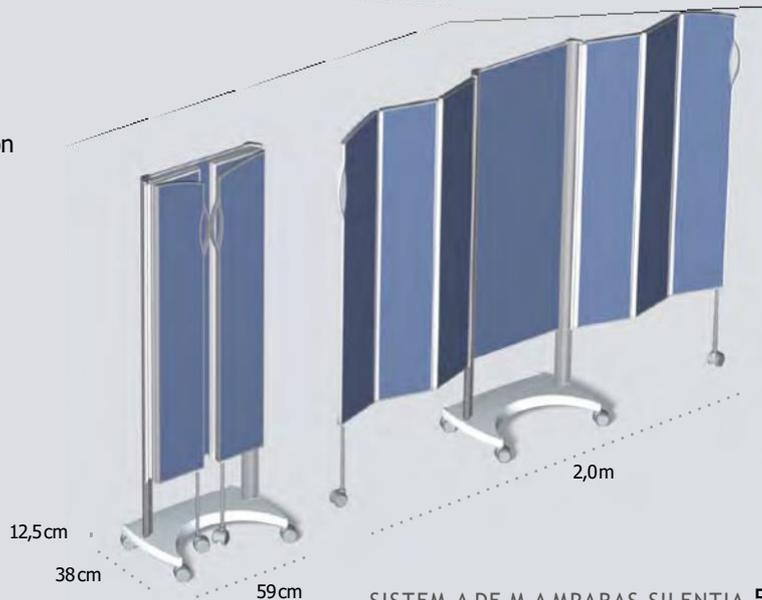



Mamparas rígidas



La mampara rígida ha sido desarrollada para lugares en los que se requiere una separación permanente. El sistema ofrece, además, varias posibilidades de variación. Por ejemplo: una mampara rígida entre camas se puede combinar con una mampara plegable extensible en el pie de la cama. La mampara rígida también permite construir cabinas vestuario y otros tipos de espacios en la sala, sin intervenir en las paredes.

TAMAÑOS ESTÁNDAR


LONGITUD	ALTURA	PESO	REFERENCI A, COLOREAD A	REFERENCI A DAYLIGHT TOP	REFERENCI A DAYLIGHT TOP DUO	REFERENCI A DAYLIGHT	REFERENCI A DAYLIGHT DUO
1,3m	1,45 m	6,2 kg	6150	6150-DT		6150-D	
1,3m	1,65 m	7,2 kg	6250	6250-DT	No disponible	6250-D	No disponible
1,3m	1,85 m	8,3 kg	6350	6350-DT		6350-D	
2,4m	1,45 m	11,4 kg	6155	6155-DT	6155-DTD	6155-D	6155-DD
2,4m	1,65 m	13,3 kg	6255	6255-DT	6255-DTD	6255-D	6255-DD
2,4m	1,85 m	15,3 kg	6355	6355-DT	6355-DTD	6355-D	6355-DD



DAYLIGHT, RÍGIDA

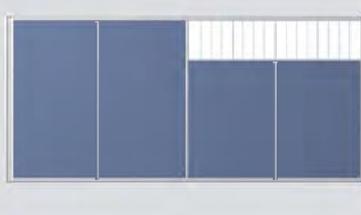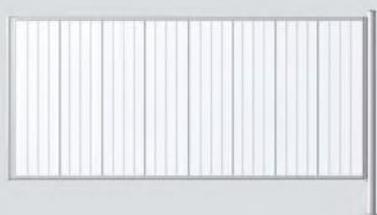


DAYLIGHT TOP DUO, RÍGIDA

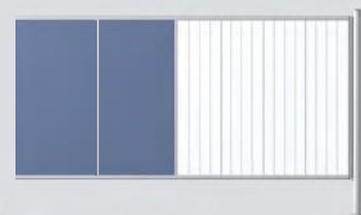


DAYLIGHT, DUO RÍGIDA



MAMPARA COLOREADA, RÍGIDA

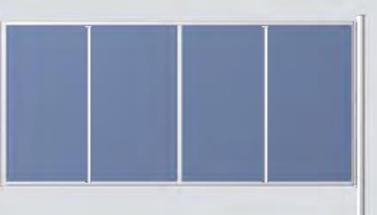

DAYLIGHT TOP, RÍGIDA

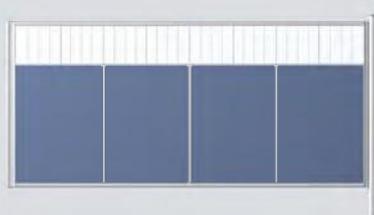



Con postes de fijación en el suelo se puede crear un pasadizo de servicio detrás de la cabecera de la cama.



Posibilidades de fijación del poste de suelo, vistas por arriba.



El poste y la tapa del poste en la base tienen un diseño elegante con una superficie lisa fácil de limpiar.

SILENTIA, MONTAJE ENSUELO

Para montar la mampara rígida con EasyClick se usa un poste de suelo de versión básica (A). Si se desea usar el poste como punto de fijación de más mamparas, rígidas o plegables, hay más versiones de poste (B-D) con hasta cuatro puntos de fijación.

El poste se fija normalmente en el suelo para una estabilidad óptima. Esto es especialmente importante si debe aguantar dos mamparas o más. No obstante, si el poste sólo se va a usar para apoyar una sola mampara fijada en pared, puede estar suelto en el suelo.

TAMAÑOS ESTÁNDAR DE POSTES DE SUELO

ALTURA	PESO	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
1,45m	3,3kg	6561-A	6561-B	6561-C	6561-D
1,65m	3,5kg	6562-A	6562-B	6562-C	6562-D
1,85m	3,8kg	6563-A	6563-B	6563-C	6563-D



ALARGADOR DE MAMPARA

Aparta de la pared el punto de fijación de la mampara plegable; bien para hacer sitio para una mesita de noche o para alargar una mampara plegable. Disponible en cuatro longitudes y tres alturas.

ALTURA	REFERENCIA A, LONGITUD 0,5M	REFERENCIA A, LONGITUD 0,75M	REFERENCIA A, LONGITUD 1,0M	REFERENCIA A, LONGITUD 1,2M
1,45m	6162	6163	6164	6165
1,65m	6262	6263	6264	6265
1,85m	6362	6363	6364	6365

Mamparas plegables Silentia

TAMAÑOS ESTÁNDAR


NÚMERO DE SECCIONES	REFERENCIA A, COLOREAD A	REFERENCIA DAYLIGHT TOP	REFERENCIA DAYLIGHT DUO	REFERENCIA A DAYLIGHT	LONGITUD	ALTURA	PESO	TAMAÑO, MAMPARA PLEGADA	
								ANCHURA	PROFUNDIDAD
5	6105	6105-DT	6105-DD	6105-D	1,25 m	1,45 m	8,0 kg	0,25 m	0,10 m
	6205	6205-DT	6205-DD	6205-D	1,25 m	1,65 m	9,5 kg	0,25 m	0,10 m
	6305	6305-DT	6305-DD	6305-D	1,25 m	1,85 m	11,5 kg	0,25 m	0,10 m
7	6107	6107-DT	6107-DD	6107-D	1,75 m	1,45 m	12,0 kg	0,25 m	0,14 m
	6207	6207-DT	6207-DD	6207-D	1,75 m	1,65 m	14,0 kg	0,25 m	0,14 m
	6307	6307-DT	6307-DD	6307-D	1,75 m	1,85 m	16,0 kg	0,25 m	0,14 m
9	6109	6109-DT	6109-DD	6109-D	2,25 m	1,45 m	15,5 kg	0,25 m	0,18 m
	6209	6209-DT	6209-DD	6209-D	2,25 m	1,65 m	18,0 kg	0,25 m	0,18 m
	6309	6309-DT	6309-DD	6309-D	2,25 m	1,85 m	20,5 kg	0,25 m	0,18 m
11	6111	6111-DT	6111-DD	6111-D	2,75 m	1,45 m	18,5 kg	0,25 m	0,22 m
	6211	6211-DT	6211-DD	6211-D	2,75 m	1,65 m	21,5 kg	0,25 m	0,22 m
	6311	6311-DT	6311-DD	6311-D	2,75 m	1,85 m	24,5 kg	0,25 m	0,22 m
13	6113	6113-DT	6113-DD	No disponible	3,25 m	1,45 m	22,0 kg	0,25 m	0,26 m
	6213	6213-DT	6213-DD	No disponible	3,25 m	1,65 m	25,5 kg	0,25 m	0,26 m
	6313	6313-DT	6313-DD	No disponible	3,25 m	1,85 m	29,0 kg	0,25 m	0,26 m
15	6115	6115-DT	6115-DD	No disponible	3,75 m	1,45 m	25,5 kg	0,25 m	0,30 m
	6215	6215-DT	6215-DD	No disponible	3,75 m	1,65 m	29,5 kg	0,25 m	0,30 m
	6315	6315-DT	6315-DD	No disponible	3,75 m	1,85 m	33,5 kg	0,25 m	0,30 m

La tabla indica los tamaños estándar con intervalos de longitud de 0,5 m. La mampara también se ofrece en intervalos de 0,25 m si la longitud total es de entre 0,75 m y 3,75 m. Es posible modificar en 0,1 m ambas alturas estándar – 1,45 m, 1,65 m y 1,85 m –, ajustando las patas de rueda. La altura de patas de rueda se indica en el pedido.


Nota: Las mamparas más largas (12–15 secciones) son para usar en forma de L alrededor de la cama.

ELEGIR LA FIJACIÓN ADECUADA PARA LA MAMPARA QUE SE NECESITA

(A) La fijación de la mampara plegable está normalmente en el lado izquierdo, lo cual significa que se pliega a la derecha de la fijación de pared. (B) Para no ocupar espacio innecesario en, por ejemplo, un montante de puerta, la mampara se puede pedir con fijación invertida.

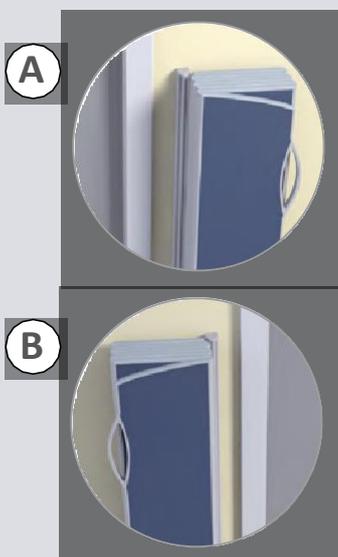


MAMPARA COLOREADA

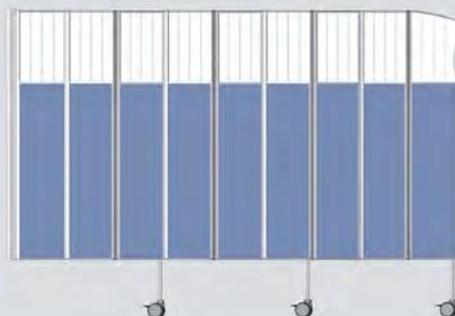


DAYLIGHT TOP

La parte superior tiene aproximadamente 0,3–0,4 m de altura. Dependiendo de la altura de panel elegida.

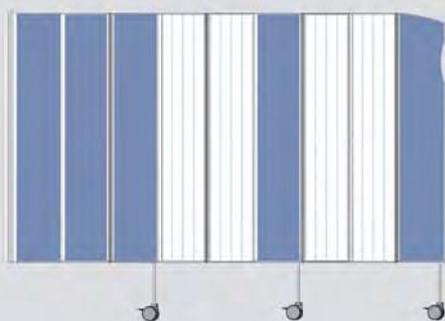

DAYLIGHT DUO

Las secciones opacas están colocadas en pares.

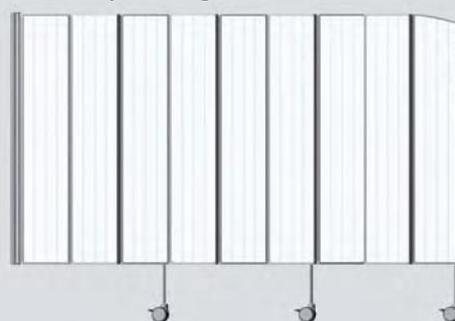

DAYLIGHT


Colores y dibujos



MAMPARA FRONTAL SILENTIA DE 1,5 M

Referencia 6522, altura 1,55 m
Referencia 6523, altura 1,85 m

Anchura extendida, 1,5 m. Anchura plegada, 0,55 m. La mampara es útil cuando se requiere una mampara independiente; por ejemplo, para vestuario o en extremos de cama. La distancia entre ejes pequeña ahorra valioso espacio de suelo, y la poca altura reduce el riesgo de tropezar en la base.

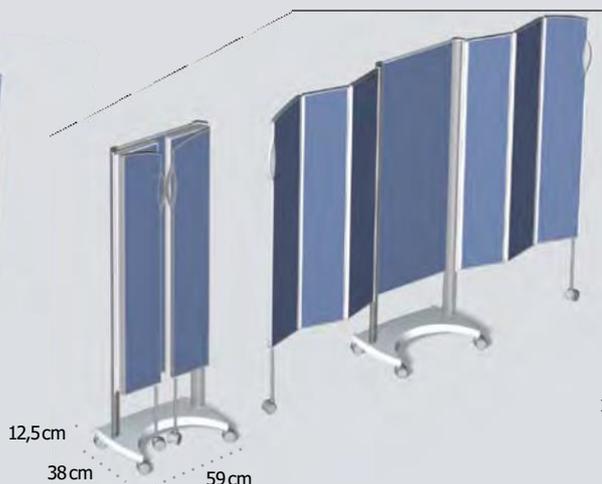

MAMPARA FRONTAL SILENTIA DE 2,0 M

Referencia 6525, altura 1,55 m
Referencia 6526, altura 1,85 m

Anchura extendida, 2,0 m. Anchura plegada, 0,55 m. Protección de miradas eficaz en el extremo de la cama y en pasillos. También puede usarse como vestuario. Las ruedas se bloquean cuando la mampara está extendida. La distancia entre ejes pequeña ahorra valioso espacio de suelo, y la poca altura reduce el riesgo de tropezar en la base.



CARRO DE MAMPARA

Referencia 6514, altura 1,45 m
Referencia 6518, altura 1,65 m
Referencia 6520, altura 1,85 m

Accesorio para mamparas plegables con hasta 15 secciones de longitud. La mampara se monta con EasyClick. **Nota:** Las mamparas más largas (12-15 secciones) son para usar en forma de L alrededor de la cama.

Mordazas y separadores



MORDAZA ESTÁNDAR PARA RIEL DE PARED

Referencia 6502

Para fijación en riel de pared. Una solución flexible que permite mover la mampara lateralmente en el riel de pared. Distancia entre el riel de pared y la mampara: 40 mm.



SEPARADOR DE 20MM

Referencia 6506

Se usa para separar la mampara de la pared; por ejemplo, para la separación fuera de una moldura. Se entregan por pares.



SEPARADOR DE 100 Y 200 MM

Referencia 6507, 100 mm

Referencia 6508, 200 mm

Para separar la mampara de la pared. Se entregan por pares.



SEPARADOR AJUSTABLE

Referencia 6509, 200–350mm

Referencia 6510, 300–500mm

Se usa para una separación grande entre la mampara y la pared. Se entrega por unidades.



MORDAZA DE APOYO

Referencia 6524

Se usa junto con la mordaza estándar 6502 cuando hay dos rieles de pared montados en la pared.



MORDAZA CON SEPARADOR

Referencia 6535

Solución idónea cuando se requiere una separación entre la mampara y el riel de pared. Distancia entre el riel de pared y la mampara: 150 mm.



MORDAZA AJUSTABLE

Referencia 6516

Para ajustar diferentes distancias entre los rieles IVA superior e inferior. La mordaza es ajustable entre 0 y 150 mm. Se usan junto con mordaza estándar o mordaza con separador.

Fijación de pared y poste de suelo



FIJACIÓN DE PARED

Referencia 6539, altura 1,45m

Referencia 6544, altura 1,65m

Referencia 6540, altura 1,85m

Para montaje sencillo directamente en la pared. Normalmente se entrega una fijación de pared con las mamparas. Las fijaciones de pared adicionales deben pedirse por separado.



FIJACIÓN DE PARED CON APOYO DE SUELO

Referencia 6537, altura 1,45m

Referencia 6545, altura 1,65m

Referencia 6538, altura 1,85m

La fijación de pared proporciona apoyo en el suelo cuando se monta con mordaza.



FIJACIÓN DE PARED CON APOYO DE SUELO Y ALAROGUE SUPERIOR

Referencia 6541, altura 1,45m

Referencia 6546, altura 1,65m

Referencia 6542, altura 1,85m

La fijación de pared se usa con mordaza cuando hay un riel de pared sobre la mampara.



POSTE DE SUELO

Referencia 6561A, altura 1,45 m


Referencia 6562A, altura 1,65 m

Referencia 6563A, altura 1,85m

El poste de suelo se puede usar como apoyo de una mampara fijada en pared y como punto de fijación para mamparas plegables. El poste se atornilla en el suelo. Hay más variantes en la página 7.

Medidas importantes

Las mamparas plegables se pueden montar directamente en la pared con separadores o mordazas en rieles sanitarios horizontales. Las diferentes formas de montaje dependen del tipo de sala. Las ilustraciones abajo muestran las alturas recomendadas para rieles sanitarios, aunque también pueden utilizarse otras medidas. Contacten con el distribuidor local para obtener una solución óptima.

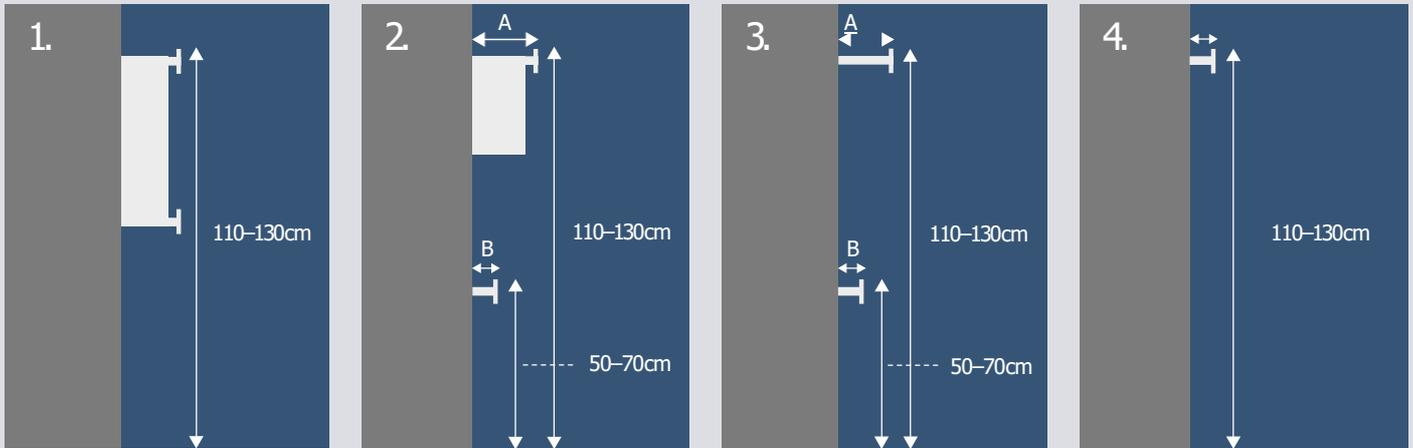

MORDAZA DE APOYO (SUPERIOR)
Referencia 6524



MORDAZA CONSEPARADOR (SUPERIOR E INFERIOR)
Referencia 6535

Esta combinación es necesaria cuando se necesita un espacio entre el riel y la mampara para tubos y otros equipos. *Para medidas importantes, ver el número 1.*




MORDAZA ESTÁNDAR (SUPERIOR)
Referencia 6502

MORDAZA ESTÁNDAR (INFERIOR)
Referencia 6502


Esta combinación de mordazas de apoyo se usa cuando 2 rieles están en una línea vertical. *Para medidas importantes, ver el número 1.*

MORDAZA AJUSTABLE (INFERIOR)
Referencia 6516

Esta combinación de mordazas de apoyo se usa cuando un riel está más cerca de la pared que el otro riel. *Para medidas importantes, ver el número 2 y 3.*

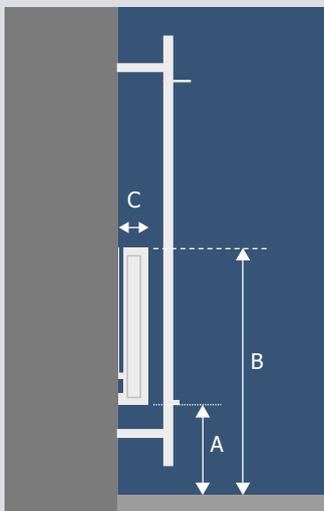

MONTAJE DELANTE DE UN RADIADOR CONSEPARADOR DE MONTAJE EN PARED

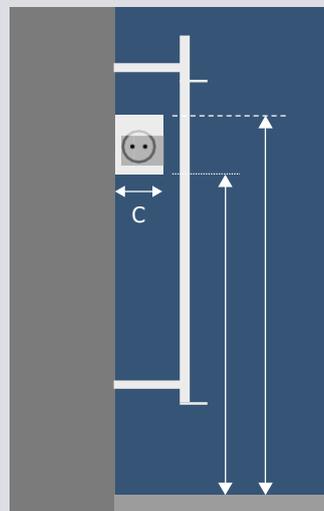

MONTAJE DELANTE DE UN PANEL DE ALIMENTACIÓN CONSEPARADOR DE MONTAJE EN PARED